

故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症 状	チェック箇所
● 電源ボタンを押しても作動しない。	○ 電池 2 本のセット方法、極性方向 (+・-) は正しいですか? ○ 電池カバーを最後までしっかりと閉めていますか? ※ 電池カバーを最後までしっかり閉めないと作動しません。

※確認後なお、異常が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず弊社カスタマーサービス課に相談ください。

お問い合わせは アルインコ フィットネス事業部 カスタマーサービス課

☎ 0120-30-4515 受付時間 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00 (土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)

保 証 書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無償修理をいたします。

保 証 規 約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは当社のサービス機関にお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等については本保証は適用されません。
 - 説明以外の誤操作、取扱上の不注意
 - 天災、火災、地震等による故障
 - 砂・泥・水かぶり等が原因で生じた故障
 - お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等
 - 保存上の不備
 - 当社規定の修理取扱所以外で行われた修理等による故障
 - 本製品本来の使用目的以外の使用
 - 日本国外でのご使用の場合
 - 本保証書の添付のない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については運賃、諸費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間(1年間)が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえない事があります。その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

※お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

アルインコ株式会社 フィットネス事業部 大阪府高槻市三島江1-1-1

修理・アフターサービスのご案内

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。保証規約以外の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。なお、この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後、約5年です。詳しくは、弊社カスタマーサービス課までお問い合わせください。

アルインコ株式会社
フィットネス事業部 カスタマーサービス課
フリーダイヤル ☎ 0120-30-4515

受付時間 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00 (土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)

※故障や異常が発生した場合、まずは本書P6「故障かな?と思う前に」をご確認ください。

左記以外受付
FAX : 072-678-6410
E-mail : fcs-syuuri@alinco.co.jp
FAX又はメールでのお問い合わせの場合、回答に時間を要する場合がございます。予めご了承ください。




arelamassage

ハンディーマッサージャー アルキュア 取扱説明書 MCB022



【各部の名称】

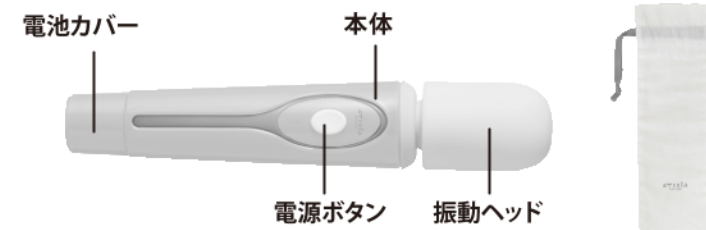

安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。
●改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、ハンディーマッサージャーアルキュア「MCB022」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。
尚、本製品の連続使用時間は15分です。(連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。)
●無断の複製は固く禁じます。

管理医療機器

一般的名称：家庭用電気マッサージ器	住 所：大阪府高槻市三島江1-1-1	防 水：IPX7 相当
販 売 名：ハンディーマッサージャー アルキュア	生 産 国：中国	定 格 電 圧：DC 3.0 V
品 番：MCB022	製品サイズ：W 44 × D 42.5 × H 230 mm	主 な 材 質：本体:ABS、シリコンゴム 収納ポーチ:綿、ポリエステル
認 証 番 号：226AKBZX00055000	製 品 重 量：約 200 g	付 属 品：収納ポーチ
製造販売業者：アルインコ株式会社	電 源：単3電池 × 2本 (別売)	

【使用上の警告・注意事項】

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の注意及び警告内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従ってご使用、点検してください。

⚠ 警 告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険のあることを示します。

⚠ 注 意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。
・破損したままで使用しますと、傷害事故の原因になります。

絵表示の意味



絶対におこなわないでください。

必ず指示に従い、おこなってください。



分解をしないでください。

確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じたいかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

- また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、書かれている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

⚠ 警 告



- 本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。
- 頭、胸、腹、骨部(ひじ、ひざなど)へは使用しないでください。ケガや事故のおそれがあります。

- 使用中、髪が本体と振動ヘッドの間などに巻き込まれないように注意してください。ケガや事故、故障のおそれがあります。
- 本体の上に座ったり物を置いたり、無理に力を掛けるご使用方法はおやめください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。ケガや事故のおそれがあります。

- お子様には使用させないでください。また、本製品を遊具として使用しないよう十分ご注意ください。
 - 他の治療器と同時に使用しないでください。気分が悪くなるなど体調不良を起こすおそれがあります。
 - 眠気がする時、また、眠りながらの使用はおやめください。事故を引き起こすおそれがあります。
 - 振動ヘッドを強い力で曲げないでください。けがや事故、故障のおそれがあります。
 - 本機の連続使用時間は最高15分です。15分以上の連続作動はおやめください。また、ご使用後1時間はご使用にならないでください。故障の原因になります。
 - マッサージは15分以上しないでください。また同じ部位へ3分以上マッサージしないでください。身体へ必要以上の刺激を与え、逆効果となるおそれがあります。
 - 医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。
- 例 血栓〔血塞〕症、重度の動脈ひゅう（瘤）、急性静脈ひゅう（瘤）、各種皮膚炎、皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など
- 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

- ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- 悪性しゅよう（腫瘍）のある人。
- 心臓に障害のある人。
- 温度感覚喪失のある人。
- 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害からくる知覚障害のある人。
- 皮膚に創傷のある人。
- 安静を必要とする人。
- 体温38℃以上（有熱期）の人。
- 例1 急性炎症症状【けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。
- 例2 衰弱しているとき。
- 骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）の骨折、ねんざ（捻挫）、肉離れなど、急性【とう（疼）痛性】疾患の人。
- ケガをしている人。
- かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する人。
- 背骨（脊椎）に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人。
- けんしょう（腱鞘）炎の人。
- その他、医療機関で治療中の人。
- 上記以外に身体に異常を感じている人。

- 使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。
- 身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。
- しばらく使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家に相談してください。
- 小さなお子様には本製品の上で遊ばせない、及び上に乗らせないよう十分ご注意ください。

⚠ 注 意

- 本製品は必ず屋内でご使用ください。
- 日本国内で使用してください。
- ご使用前には、電源ボタンが正常に作動することを確認してください。本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、使用しないでください。

- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ（雑音）が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。

- 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くでの使用・保管はしないでください。
- ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。

保管・お手入れについての警告・注意事項

⚠ 警 告

- 保管する際は電池を抜き取り、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- お手入れの前に、本体から電池を取り出してください。また、水分などが内部に入らないよう注意してください。
- 本体は次の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ないところに整理・保管してください。

⚠ 注 意

- 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を再確認の上、ご使用ください。
- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的な汚れ等を拭きとってください。その際、シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

電動機器の警告事項

⚠ 警 告

- 濡れた手で電池交換はしないでください。感電・故障の原因になります。
- 長時間使用しない場合は乾電池を必ず外してください。乾電池が液漏れを起こして故障などの原因になります。
- 乾電池は乾電池に記載の使用表示に従ってご使用ください。
- 使用済乾電池は端子にテープを貼るなどの処置をしてから、地域で定める条例に従って廃棄してください。

- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には放置しないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- 室温が10℃以下・35℃以上の状態では使用しないでください。正常に作動しなくなるおそれがあり、製品の劣化も早めます。
- 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で通電させないでください。故障や発火の原因になります。

- 製品を落下させたり製品内部に水が浸入した場合、絶対に使用せず、弊社カスタマーサービス課にご連絡ください。


- 本製品の分解・改造は行わないでください。機器が故障した場合、勝手に修理などせず、製造販売元（弊社カスタマーサービス課）に連絡してください。弊社以外での修理は行わないでください。

- 使用しても効果が現れないときは、医師又は専門家に相談ください。
- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、お手数でも弊社カスタマーサービス課までご相談ください。
- お買い上げ日より1年を過ぎた製品は、有償にて点検サービスも行っております。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの各自治体の指導に従って処分してください。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いいたします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

ご使用方法など

電池セット方法

1. 電池カバーを反時計方向に回して、電池ボックスを開けてください。
2. 電池ボックスに単3電池2本を極性（+・-）を間違えないように入れてください。

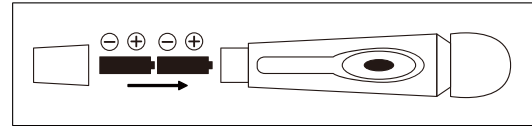

3. 電池カバーをしっかりと閉めてください。

- ⚠ 注意 ● 電池カバーを最後までしっかり閉めないと作動しません。



ご使用方法


1. 【電源ボタン】を押すと振動（弱）が始まります。マッサージする部位に本体の振動ヘッドを当ててください。
2. 【電源ボタン】をもう一度押すと、振動（強）に切り替わります。
3. 【電源ボタン】をもう一度押すと、振動が停止します。

電源ボタンを
1回押す…【弱い振動】
2回押す…【強い振動】
3回押す…【電源OFF】

- ⚠ 注意 ● 同じ箇所へ3分以上当てないでください。必要以上の刺激を与えると逆効果となるおそれがあります。

お手入れ方法

- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、1ヶ月ごとに清掃・点検・保守を行ってください。
- 汚れは柔らかな布で軽く拭いてください。汚れが落ちない場合は、ぬるま湯で中性洗剤をうすめ、柔らかな布に浸し、よく絞ってから水を浸した布で軽く拭いてください。
※シンナー系や酸系の強い洗剤は使用しないでください。

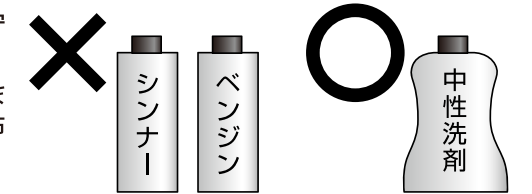

防水について

使用するときには、電池カバーをしっかりと閉じてください。また本体は、JIS IPX7相当の防水が施されており、水しぶきのかかる場所でも使用できる仕様となっておりますが、大量の水や強い水しぶきをかけないでください。

- ⚠ 注意 ● 電池カバーを最後までしっかり閉めていない場合、本体内部に水が浸入し、故障の原因となります。ご注意ください。



使用例

マッサージしたい部位に当ててお使いください。



- ⚠ 注意 ● 同じ箇所へ3分以上当てないでください。必要以上の刺激を与えると逆効果となるおそれがあります。